

Loopwheels voor rolstoelen:

Loopwheels in model Urban en Extreme

Korte handleiding

NL

Hartelijk dank dat je hebt gekozen voor Loopwheels™. We wensen je veel plezier op je wielen.


Lees VOORDAT je dit product gaat gebruiken eerst de korte handleiding en de complete gebruiksaanwijzing voor je Loopwheels.

Beide documenten staan op onze website
<https://loopwheels.com/technical/user-manual/>.

Lees in onze gebruiksaanwijzing ook de informatie over veiligheid en onderhoud. Het allerbelangrijkste: ga niet harder dan 25 km/u.

Dealers: Deze handleiding MOET aan de gebruiker van het product worden overhandigd.

Probeer NOOIT de lagers te vervangen zonder gericht advies via info@loopwheels.com, omdat onze lagers vast zitten in de wielen.

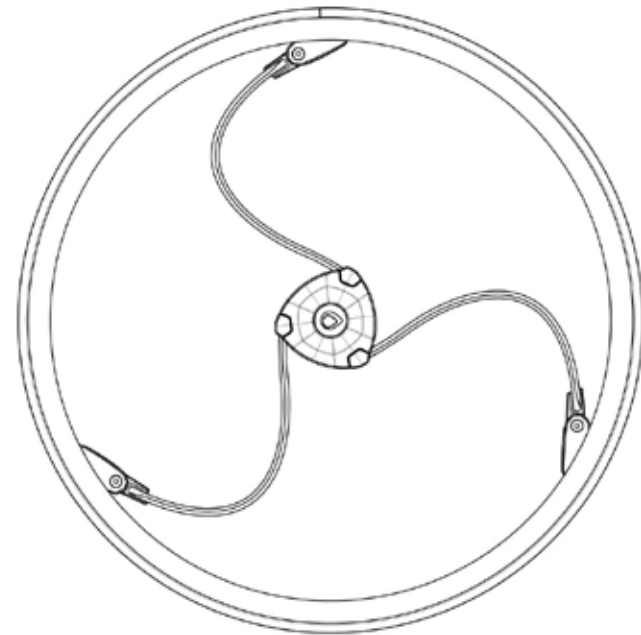

Inhoud:

1. Veiligheid
2. Productidentificatie
3. Componenten
 - 3.1 Overzicht van componenten
 - 3.2 Lagers
4. Accessoires
 - 4.1 Banden
 - 4.2 Afstandhouders
5. Loopwheels op je rolstoel aanbrengen
 - 5.1 Wielvlucht
 - 5.2 Loopwheels pasklaar maken voor het eerste gebruik
 - 5.3 Loopwheels van je rolstoel af halen
6. Onderhoudsschema

1. Veiligheid

Het algemene advies voor rolstoelgebruik is van toepassing. Volg dit advies als je Loopwheels gebruikt voor je eigen persoonlijke veiligheid en die van anderen.

⚠ WAARSCHUWING

Bij hoge snelheid kun je de controle over je rolstoel kwijtraken en omvallen.

- Houd je aan de plaatselijke regels en adviezen voor snelheid en ga in elk geval niet sneller dan 25 km per uur.
- Rij nergens tegenaan.

⚠ WAARSCHUWING

Risico van rijstijlen die ongeschikt zijn voor een omgeving

- Op natte, losse of ongelijke ondergrond is sprake van slipgevaar.
- Pas je snelheid en rijstijl altijd aan de omstandigheden aan (weer, oppervlak, persoonlijke mogelijkheden en ervaring).

⚠ WAARSCHUWING

Loopwheels™ zijn niet bestemd voor personenvervoer in een motorvoertuig
- Niet overbrengen op een pasklaar gemaakte zitting van een ander voertuig.


⚠ WAARSCHUWING

Risico op ernstig letsel door onverwacht remmen van de wielen

- Loopwheels™ mogen alleen worden gebruikt met een stijf spatbord boven de banden, als er een tussenruimte van 30 mm is tussen het spatbord en de band. Het risico bestaat dat de wielen tijdens het rijden het spatbord raken en zo zorgen voor onverwacht afremmen.
- Controleer of er in alle situaties sprake is van 30 mm tussenruimte boven de band.


⚠ LET OP

Er is een risico dat vingers, armen of kleding in het bewegende wiel vast komen te zitten, tussen wiel en stoel of in bewegende onderdelen zoals de as.
- Zorg er bij het aanbrengen en gebruiken van Loopwheels™ voor dat er niets beklemd raakt.

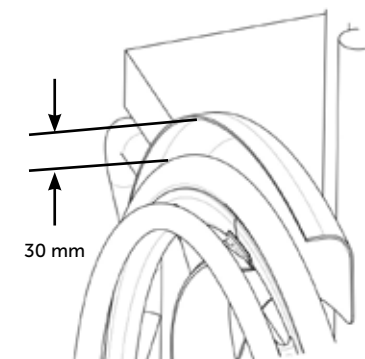

2. Productidentificatie

Elk wiel heeft een uniek identificatienummer op de naaf om deze te kunnen traceren.

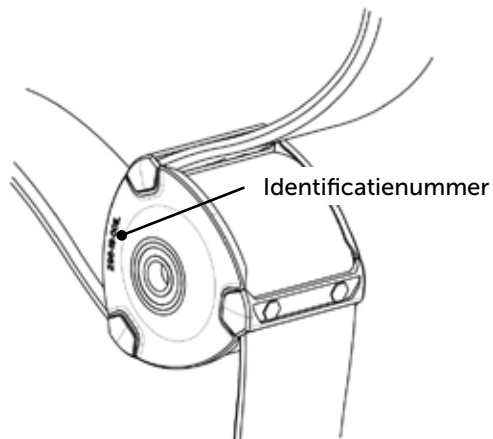


3. Componenten

3.1 Overzicht van componenten

Loopwheels™ Urban en Loopwheels™ Extreme zijn wielen met geïntegreerde vering voor gebruik met handbewogen rolstoelen.

Elk wiel bestaat uit de volgende componenten:

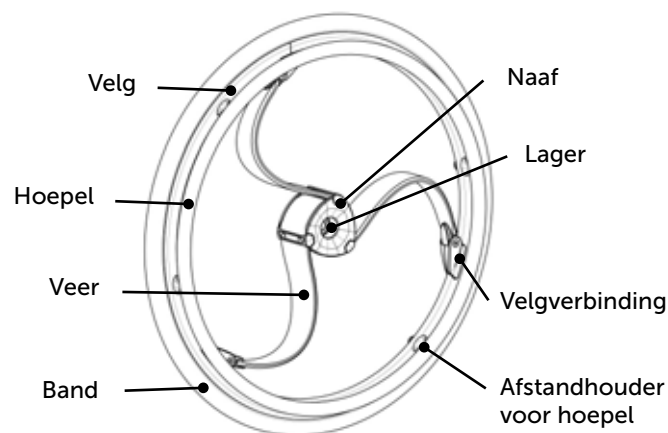

Jouw wiel kan enigszins van de weergave afwijken, omdat elk Loopwheels aan de hand de specificaties in de bestelling afzonderlijk wordt gemaakt.

3.2 Lagers



De lagers zitten vast in de naaf van het wiel.

PROBEER DE LAGERS NOOIT ZELF TE VERWIJDEREN OF TE VERVANGEN!

Vraag ons eerst om advies over de juiste werkwijze voordat je lagers van Loopwheels™ verwijdert.

4. Accessoires

4.1 Banden

Voor gebruik met Loopwheels™ worden pneumatische banden aanbevolen, zoals Schwalbe® Marathon Plus.


Het gebruik van massieve banden wordt NIET aangeraden: hierdoor komt de garantie te vervallen.

Voor Loopwheel Urban is bandmaat ETRTO 25-540 of 24 x 1,00 inch nodig.

Voor Loopwheel Extreme is bandmaat ETRTO 47-507 of 24 x 1,75 inch nodig.

4.2 Afstandhouders

Per Loopwheels leveren we 2 roestvrijstalen en 1 rubber afstandhouders mee. Hiermee kun je de wielen bij montage op je rolstoel zo afstellen dat ze perfect lopen en helpt voorkomen dat de wielen de stoel raken. Afhankelijk van het model en de specificatie van je rolstoel, kan het zijn dat je geen afstandhouders nodig hebt.

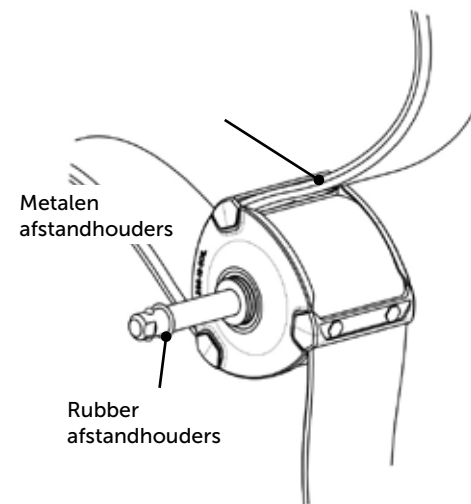

5. Loopwheels™ op je rolstoel aanbrengen

5.1 Wielvlucht

Wielvlucht is de hoek of helling waaronder de wielen aan de stoel zijn gemonteerd. Elke extra graad wielvlucht voegt aan weerskanten van de stoel 1 cm aan de breedte van de stoel toe. Maar een grotere wielvlucht zorgt voor meer stabiliteit, beter draaien en meer ruimte voor je handen. Tot op zekere hoogte is dit een persoonlijke keuze. MAAR:

- We raden een optimale wielvlucht aan van 6 tot 8 graden voor Loopwheels™ Urban en Extreme.
- Loopwheels™ mogen niet met een wielvlucht van meer dan 12 graden worden gemonteerd.

5.2 Loopwheels™ pasklaar maken voor het eerste gebruik

Opmerking: om de oude wielen te verwijderen en Loopwheels™ aan te brengen, moet je ergens anders zitten dan in je rolstoel!


STAP 1. Maak de remmen los.

STAP 2. Houd de rolstoel met één hand rechtop.

STAP 3. Haal met de andere hand de oude wielen van je rolstoel door het midden van de as in te drukken.


STAP 4. Verwijder de bestaande assen uit de oude wielen. Je kunt deze als je wilt hergebruiken of nieuwe assen gebruiken voor je Loopwheels™.

STAP 5: Druk vanaf de buitenkant een as in elk Loopwheel™.

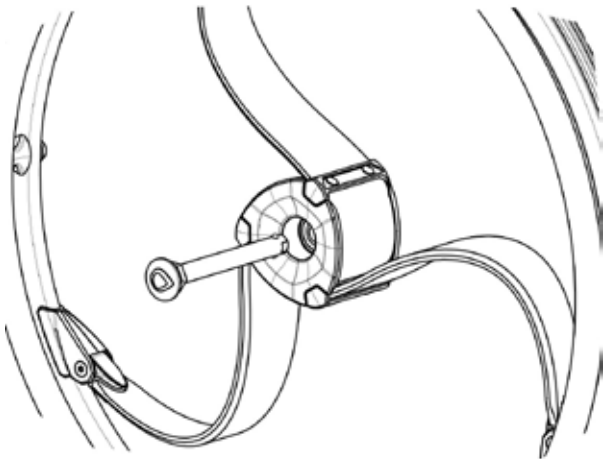


STAP 6. Steek de as (met het wiel eraan) in het asgat van de rolstoel. Eerst de ene zijde, dan de andere.

STAP 7: Draai het wiel langzaam om te zien het Loopwheel™ aanloopt of ergens het frame van de stoel raakt. We raden op alle punten een minimale vrije ruimte aan van 10 mm.

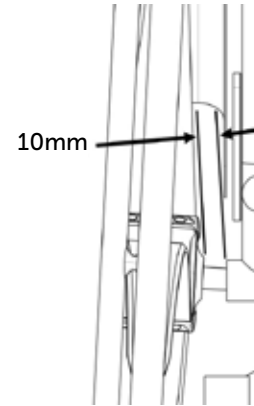

Bovendien moet er boven een wiel een afstand zijn van en minste 30 mm.

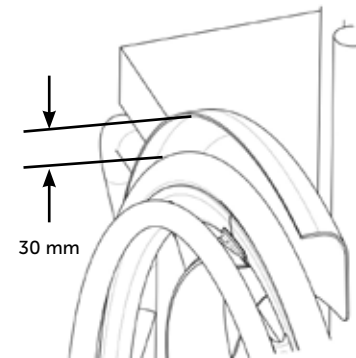


Wanneer er voldoende ruimte is rondom het wiel, ga verder met STAP 11.


Wanneer er onvoldoende ruimte is of het wiel raakt de stoel, ga verder met STAP 8.

STAP 8: Verwijder het Loopwheer van de stoel, plaats een van de stalen afstandhouders op de as van de BINNENkant van het wiel. Hierdoor komt het Loopwheer verder van de rolstoel af te staan.

Herhaal STAP 7 en 8 maximaal drie keer tot er voldoende ruimte is tussen het wiel en het frame van de rolstoel.

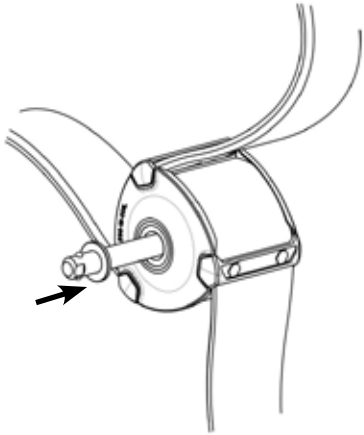

STAP 9: Borg de stalen afstandhouders door de rubber sluitring op de as het het Loopwheer™ te schuiven.

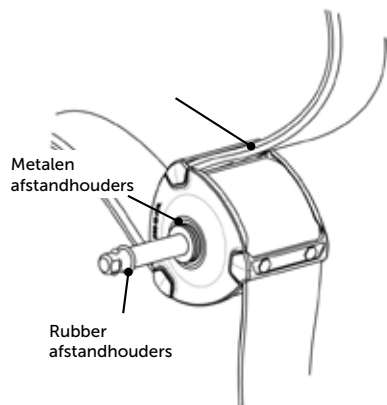

STAP 10: Zet de wielen weer aan de stoel.

STAP 11: Controleer of de uitneembare assen helemaal binnen de asbehuizing van de rolstoel vallen.

STAP 12: Controleer of de remmen nog goed contact maken met de band. Als dat niet het geval is, vraag dan bij de leverancier van je rolstoel of je therapeut om de remmen te stellen.

5.3 Loopwheels™ van je rolstoel af halen

STAP 1. Maak de remmen los.

STAP 2. Houd de rolstoel met één hand rechtop.

STAP 3. Houd met de andere hand het wiel vast bij de naaf.

STAP 4. Druk met je duim op de knop van de uitneembare as en houd deze ingedrukt.

STAP 5. Trek de as uit de asbehuizing van de rolstoel.

6. Onderhoudsschema

Voer met het oog op veilige en betrouwbare werking regelmatig de volgende controles en onderhoudswerkzaamheden uit, of laat dit door iemand anders doen.

	Wekelijks	Maandelijks	Jaarlijks
Visuele controle	X		
Bekijk de veren van de Loopwheels op schade en luister of er een verandering in geluid is		X	
Controleer of de hoepels niet onafhankelijk van de velg werken	X		
Laat de rolstoel en de wielen controleren door een specialistische dealer			X
Controleer de bandenspanning	X		
Controleer of de Loopwheels™ goed zijn geplaatst en of de assen zijn geborgd	X		
Controleer de parkeerremmen		X	

Visuele controle

1. Onderzoek de wielen eenmaal pre week op los zittende onderdelen, barsten en andere tekenen van slijtage.

Controleer de veren van de Loopwheels™

1. Controleer de veren op tekenen van schade, barsten, losheid en andere defecten.

2. Luister naar draaiende wielen: zijn er nieuwe klik- of kraakgeluiden?

Als er iets anders is dan normaal, laat de wielen dan meteen nakijken door de Loopwheels™-dealer of stuur een bericht naar contact@loopwheels.com.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voor de volledige veiligheids- en onderhoudsinformatie. Deze documenten zijn te vinden op onze website via <https://loopwheels.com/technical/user-manual/>.



Veel plezier als je op pad gaat met je Loopwheels™!



© 2021 Jelly Products Ltd. Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, verveelvoudiging of bewerking van (delen) van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jelly Products Ltd. is verboden.

De naam Loopwheels™ en het Loopwheels™-logo zijn geregistreerde handelsmerken in het eigendom van Jelly Products Ltd.

De informatie in deze korte handleiding kan zonder kennisgeving worden aangepast. Raadpleeg onze handleiding via <https://loopwheels.com/technical/user-manual/> voor meer productinformatie over Loopwheels en het oplossen van problemen.

		<p>Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. De introductiedatum van dit product staat vermeld in de CE-conformiteitsverklaring.</p> <p>Dit product is beoordeeld op conformiteit met relevante wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en de fabrikant is geregistreerd bij de regelgevende instantie MHRA voor geneesmiddelen en producten voor gezondheidszorg in het VK.</p> <p>Fabrikant: Jelly Products Ltd. Unit 202 Boughton Industrial Estate, Newark, Nottinghamshire, NG22 9LD, GB.</p> <p>Geregistreerd onder nummer: 06012537</p> <p>Btw-nummer: GB915 6852 07</p> <p>E-mailadres: info@loopwheels.com</p>
---	---	---