

Loopwheels for rullestoler: Loopwheels Urban og Extreme

Hurtigguide

NOR

Takk for at du valgte Loopwheels™. Vi håper du får mye moro med hjulene dine.


FØR du tar i bruk produktet må du lese denne hurtigguiden OG gjøre deg kjent med bruksanvisningen for Loopwheels

Du finner disse dokumentene på nettstedet www.sunrisemedical.no

Les sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjonen i brukerveiledningen. Du må være spesielt oppmerksom på fartsgrensen på 25 km/t.

Forhandlere: Denne bruksanvisningen SKAL leveres til brukeren av produktet.

IKKE bytt ut lager uten å ha fått tekniske råd fra Sunrise Medical ettersom lagrene er festet til hjulene.

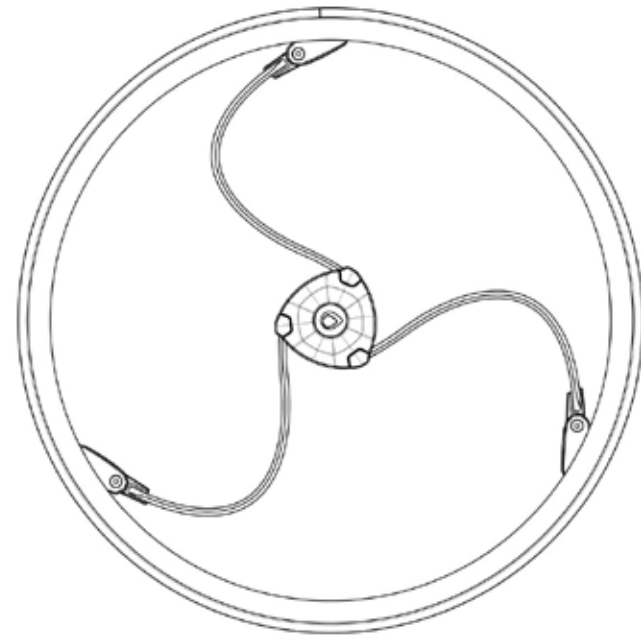

Innhold:

1. Sikkerhet
2. Produktidentifikasjon
3. Deler
 - 3.1 Oversikt over deler
 - 3.2 Merknad til lager
4. Tilbehør
 - 4.1 Dekk
 - 4.2 Avstandsstykker
5. Montere Loopwheels på rullestolen din
 - 5.1 Camber
 - 5.2 Montere Loopwheels for første gang på rullestolen
 - 5.3 Fjerne Loopwheels fra rullestolen
6. Vedlikeholdsoversikt

1. Sikkerhet

Generelle sikkerhetsråd for bruk av rullestol. Følg disse rådene for å ta vare på deg selv og andre når du bruker Loopwheels.

⚠ ADVARSEL

Ved for høy fart kan du miste kontrollen over rullestolen og velte.

- Ikke kjør fortere enn fartsgrensen på det stedet du befinner deg. Kjør aldri fortere enn 25 km/t.
- Unngå kollisjoner generelt.

⚠ ADVARSEL

Risiko knyttet til kjøring som ikke passer til forholdene

- Det foreligger en risiko for å skli på vått underlag, grus og ujevne underlag.
- Husk å tilpasse farten og kjørestilen etter forholdene (vær, føre, individuelle ferdigheter og erfaringer).

⚠ ADVARSEL

Loopwheels™ skal ikke brukes under passasjertransport i et motorkjøretøy.

- Overfør personen til et fastmontert festet sete eller bruk standard godkjente drivhjul.

⚠ ADVARSEL


Det kan oppstå alvorlige skader ved uforutsett bremsing av hjulene.

- Loopwheels™ skal ikke brukes i kombinasjon med en stiv skjerm over dekkene med mindre det er minst 30 mm mellom skjermen og dekket. Hvis avstanden er mindre, kan dekkene berøre skjermen, noe som kan føre til plutselig oppbremsing.
- Kontroller at skjermen er minst 30 mm over dekket til enhver tid.

⚠ FORSIKTIG


Fingre, armer eller klær kan komme borti hjulet eller akslingen mens rullestolen er i bevegelse.

- Hold Loopwheels™ fri for saker og ting når hjulene monteres og når rullestolen er i bruk.

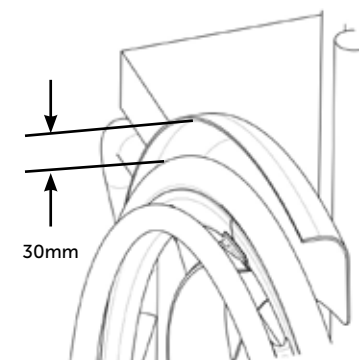

2. Produktidentifikasjon

Hvert av hjulene har et unikt identifikasjonsnummer på navet slik at det kan spores.

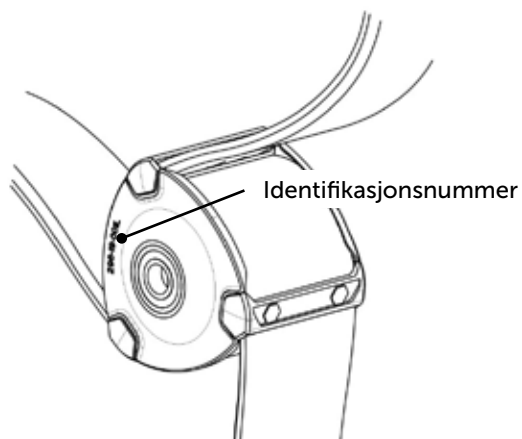


3. Deler

3.1 Deleoversikt

Loopwheels™ Urban og Loopwheels™ Extreme er hjul med integrert demping til bruk på rullestoler.

Hvert av hjulene har følgende deler:

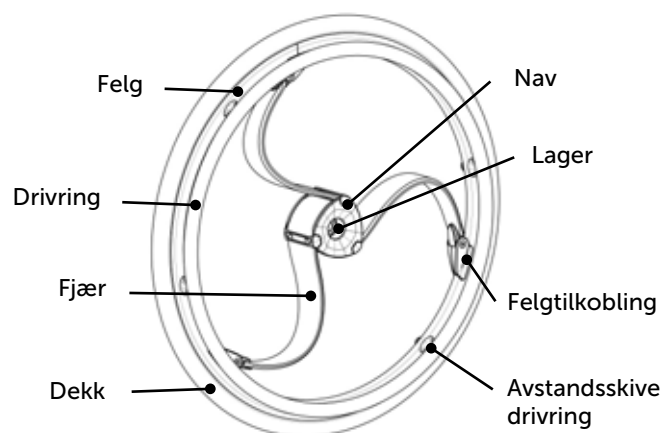

Hjulet ditt kan ha andre spesifikasjoner enn det som er vist i tabellen, fordi hvert enkelt Loopwheel blir produsert individuelt etter avtale.

3.2 Merknad til lager



Lagrene er montert og festet inne i hjulnavet.

IKKE FJERN ELLER BYTT UT LAGRENE SELV!

Ta kontakt med oss hvis du vil fjerne lagrene fra Loopwheels™.

4. Tilbehør

4.1 Dekk

Vi anbefaler at du bruker luftfylte dekk, som for eksempel Schwalbe® Marathon Plus, på Loopwheels™.


Vi anbefaler IKKE at du bruker kompakte: Bruk av slike dekk gjør garantien ugyldig.

Til Loopwheel Urban trenger du dekkstørrelse ETRTO 25-540 eller 24 x 1,00 tommer

Til Loopwheel Extreme trenger du dekkstørrelse ETRTO 47-507 eller 24 x 1,75 tommer

4.2 Avstandsstykker

Vi leverer to avstandsstykker i rustfritt stål og ett avstandsstykke i gummi sammen med hvert Loopwheel. Disse avstandsstykkene brukes for å feste hjulene godt til rullestolen og forhindre at hjulene berører rullestolen. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å bruke disse, men dette er avhengig av ha slags rullestolmodell du bruker.

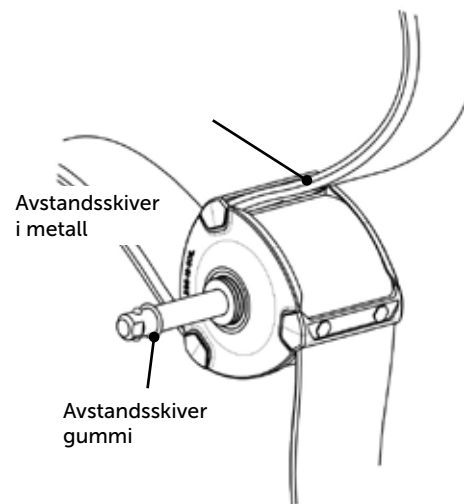

5. Montere Loopwheels™ på rullestolen din.

5.1 Camber

Camber er vinkelen eller hellingen mellom hjulene og rullestolen din. En ekstra cambergrad legger én ekstra cm til bredden på hver side av rullestolen. Jo større camber-vinkel, desto bedre stabilitet, lettere å snu og mer plass til hendene dine. Dette er også et spørsmål om smak og behag. MEN:

- Vi **rekommanderer** generelt å velge en så liten camber som mulig. For **best mulig** svingegenskaper med et elektrisk drivaggregat kan camber mellom 6 og 8 grader velges for Urban og Extreme.
- Loopwheels™ skal aldri monteres ved camber med enn 12 grader.

5.2 Montere Loopwheels™ for første gang på rullestolen

Merk: Du kan ikke sitte i rullestolen din når du fjerner de gamle hjulene og monterer de nye Loopwheels™!


TRINN 1. Løsne bremsene.

TRINN 2. Løft rullestolen i bakkant med en hånd.

TRINN 3. Fjern de gamle hjulene fra rullestolen ved å presse i senter av akslingen med den andre hånden.


TRINN 4. Fjern de eksisterende akslingene fra de gamle hjulene. Du kan enten bruke disse på nytt, eller montere nye akslinger sammen med Loopwheels™.

TRINN 5. Plasser én aksling i hvert Loopwheel™ utenfra og inn på hjulet.

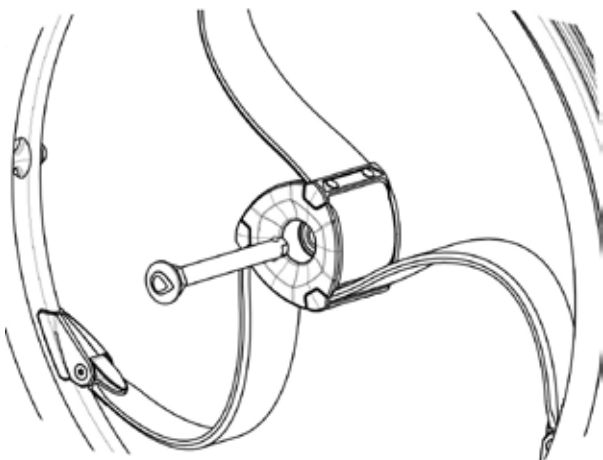


TRINN 6. Plasser akslingen (med det monterte hjulet) i hjulhylsen på rullestolen én side om gangen.

TRINN 7. Snurr sakte på hjulet for å sjekke at ingen deler av Loopwheel™ berører eller gnisser mot rullestolrammen. Vi anbefaler en klaring på minimum 10 mm over alt.

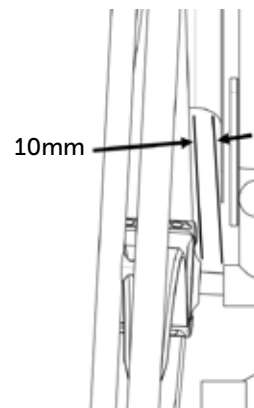

Husk at det også må være minst 30 mm fri bevegelse over hjulet.

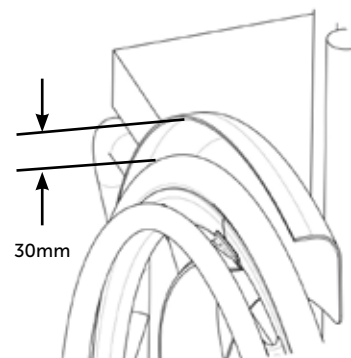


Hvis avstanden er riktig, kan du gå til TRINN 11.


Hvis en del av hjulet berører rullestolen, eller du ikke har nok klaring, må du gå til TRINN 8.

TRINN 8. Fjern Loopwheel fra rullestolen og plasser en av avstandsskivene i stål innpå akslingen fra innsiden av hjulet. Denne avstandsskiven flytter Loopwheel lengre vekk fra rammen av rullestolen.

Gjenta Trinn 7 og 8 – maksimalt tre ganger – til du får riktig klaring mellom hjulet og rullestolen.

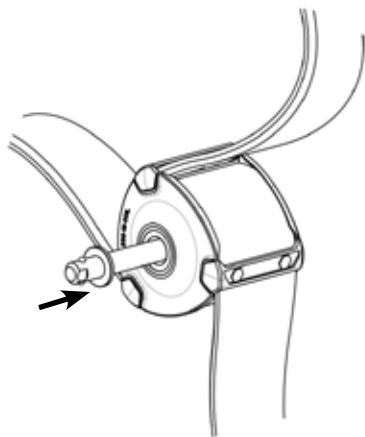

TRINN 9. Fest avstandsskivene i stål ved å tre gummiringen inn på Loopwheel™-akslingen.

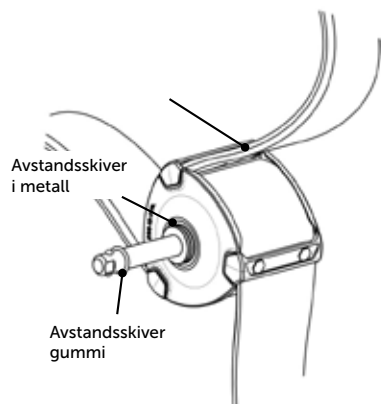

TRINN 10. Monter deretter hjulene på rullestolen.

TRINN 11. Kontroller at de avtakbare akslingene er godt festet i hjulhysene på rullestolen.

TRINN 12. Kontroller at bremsene fortsatt låser som de skal mot hjulet. Hvis de ikke gjør det, kontakt hjelpemiddelsentralen din for hjelp med justering.

5.3 Fjerne Loopwheels™ fra rullestolen

TRINN 1. Løsne bremsene.

TRINN 2. Løft rullestolen i bakkant med en hånd.

TRINN 3. Hold hjulet i hjulnavet med den andre hånden.

TRINN 4. Trykk inn akslingsknappen og hold den inne med tommelen.

TRINN 5. Trekk akslingen ut fra hjulhysen.

6. Vedlikeholdsoversikt

Husk å kontrollere og vedlikeholde hjulene regelmessig slik at du trygt kan kjøre uten problemer. Du kan også be noen om hjelp til å sjekke følgende:

| | Ukentlig | Månedlig | Årlig |
|--|----------|----------|-------|
| Visuell kontroll | X | | |
| Kontroller Loopwheel-fjæringen visuelt og lytt for å høre om de lager uvanlige lyder | | X | |
| Kontroller at drivringene sitter godt festet på felgen | X | | |
| Få forhandleren til å kontrollere rullestolen og hjulene | | | X |
| Sjekk dekktrykket | X | | |
| Kontroller at Loopwheels™ er riktig plassert og at akslingene er godt festet | X | | |
| Kontroller bremsene | | X | |

Visuell kontroll

1. Se etter løse deler, sprekker og andre tegn på slitasje i dekkene hver uke.

Kontroller fjæringen i Loopwheels™

1. Se etter slitasje, sprekker, festeproblemer og andre defekter i fjæringen.
2. Lytt til hjulene og kontroller at de ikke klikker eller knaker når de går rundt.

Hvis du synes noe ikke er som det skal, må du be om at hjelpemiddelsentralen din kontrollerer hjulene. Du kan også kontakte Sunrise Medical.



Du finner all sikkerhets- og vedlikeholdinformasjon i bruksanvisningen. Disse finner du på nettstedet www.sunrisemedical.no

Nå er det bare å komme seg ut med de nye Loopwheels™!



© 2021 Jelly Products Ltd Alle rettigheter er forbeholdt. Videre publisering, kopiering eller endringer i denne informasjonen er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Jelly Products Ltd. Navnet Loopwheels™ og Loopwheels™-logoen er registrerte varemerker eid av Jelly Products Ltd.

Informasjonen i denne hurtigguiden kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om Loopwheels og tips til problemløsning på <https://loopwheels.com/technical/user-manual/>

| | | |
|---|---|--|
|  |  | <p>Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for produktet er oppført i CE-samsvarserklæringen. Dette produktet har blitt vurdert til å samsvare med relevant britisk lovgivning, og produsenten er registrert hos «Medicines and Healthcare products Regulatory Authority» (MHRA). Produsent: Jelly Products Ltd. Unit 202 Boughton Industrial Estate, Newark, Nottinghamshire, NG22 9LD, Storbritannia. Bedriftens registreringsnr.: 06012537 VAT-nummer: GB915 6852 07 E-post: info@loopwheels.com</p> |
|---|---|--|